



شرکت آسیا جراح پیشرو
ASIA JARAH PISHRO CO. LTD

پیشرو در تولید محصولات مصرفی اتاق عمل و جراحی
The leading manufacturer of operating
room and surgical consumables

LAPAROSCOPY

Suction/Irrigation Sets

Description

The single-use instrument is convenient, leak-free, and without assembling needs.

Suction button (white), allows simple, safe tissue/clot/secretions flushing.

Irrigation button (blue), allows saline to pass into the surgical site.

Distal tip shaft holes prevent tissue damage due to inadvertent aspiration.

Clear ergonomic handpiece for unobstructed visualization

Ergonomic hand-piece ensures surgeon comfort and control

Clear coded trumpet valves and tubing ensure function.

Identification dual spikes options for Increased flexibility

Warning

Keep dry

Use only once

Don't use it when the package has been opened or damaged

Sterile EO Gas

Code No.	Product description	Packaging
3361	Suction irrigation set 3mm/280mm	14 Packs/Box
3362	Suction irrigation set 5mm/330mm	14 Packs/Box
3363	Suction irrigation set 5mm/450mm	14 Packs/Box

ست ساکشن اریگیشن

توضیحات

وسایله‌ای یک‌بار مصرف مقاوم در برابر نشت و بدون احتیاج به مونتاژ کردن

دکمه مکند (سفید)، تخلیه ایمن بافت، لخته یا ترشحات را ممکن می‌سازد

دکمه شست و شو (آبی)، امکان عبور سرم مابع به داخل موضع را امکان پذیر می‌سازد.

سوراخ‌های موجود در لوله از بروز صدمه به بافت در برابر استفاده نادرست جلوگیری می‌کند.

دسته ارگونومیک شفاف برای دید بهتر

طراحی ارگونومی امکان استفاده راحت و بهتر را به جراح می‌دهد

استفاده از لوله و قطعات شفاف، کارکرد صحیح وسیله را نشان می‌دهد

قابلیت استفاده دو اسپایک جهت افزایش جریان مایع


هشدار

در جای خشک نگهداری شود

فقط یک‌بار مصرف گردد

زمانی‌که بسته‌بندی باز یا مخدوش است استفاده نشود

استریل شده به وسیله اتیلن اکساید

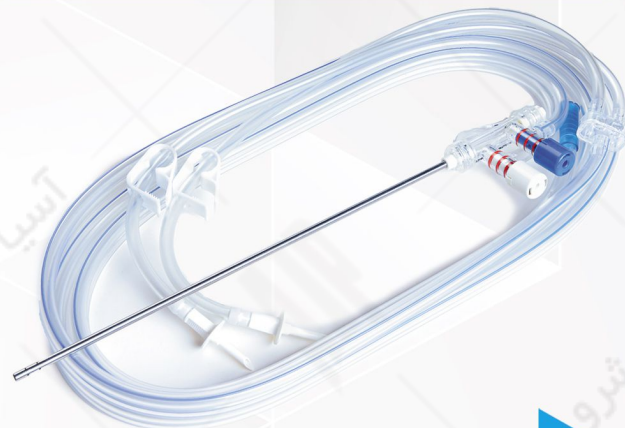

Auto-Locking Bladed Trocar

Features

Key switch locking system with detachable handle for safety shield mechanism.

Sharp flat blade and pointed shield for easy insertion and less fascia trauma.

Ergonomic trocar handle and stopcock with adequate length.

Inverted Triangle cannula for optimal attachment.

Clear cannula for better visualization.

Universal seal with 5-12 mm instruments

Code No.	Description	Packaging
33161	Detachable Tip Trocar Kit 5mm	10 packs/Box
33162	Detachable Tip Trocar Kit 10mm	10 packs/Box
33163	Detachable Tip Trocar Kit 12mm	10 packs/Box

تروکار تیغه‌دار با قفل خودکار

ویژگی‌ها

دارای سیستم قفل کلید دار با دسته قابل جدا شدن و پوشش ایمنی تیغه

دارای تیغه تیز و محافظ مناسب برای آنها به جهت کارگذاری راحت و آسیب کمتر به فاسیا.

دسته تروکار خوش دست با شیر کنترل جریان و طول مناسب.

کانول با نوک سه گوش برای اتصال و حرکت بهتر ابزار جانبی.

کانول شفاف برای دید بهتر

اندازه و سایز عمومی برای استفاده از ابزار ۵ تا ۱۲ میلی‌متر.



Retrieval Bag (Endobag)

Description

TPU or nylon pouch assure no leakage
Reopening bag design makes easy and safe specimen capture

Instructions

AJP Endobags are used in all types of laparoscopic surgery for removing excised tissue or specimen through a small incision and laparoscopic trocars

Warning

Keep dry
Use only once
Don't use when package has been opened or damaged
Sterile EO Gas

Model	Code No	Bag Volume (cc)	Packaging
Small	9152	150	40 Packs/Box
Medium	9153	450	40 Packs/Box
Large	9154	700	40 Packs/Box
Automatic Small	9145	150	40 Packs/Box
Automatic Medium	9146	450	40 Packs/Box
Automatic Large	9147	700	40 Packs/Box

کیسه تخلیه نمونه آندوسکوپی

توضیحات

کیسه از جنس پلی اورتان یا نایلون جهت اطمینان از عدم نشتی نوع باز و بسته شدن مجدد کیسه، نمونه برداری را آسان و مطمئن می‌سازد

روش استفاده

آندویگ‌های تولیدی AJP برای خارج کردن بافت‌های جدا شده و نمونه‌ها در انواع جراحی‌های لاپاراسکوپی از برش‌های کوچک جراحی و تروکارهای لاپاراسکوپی قابل استفاده می‌باشند

هشدار

در جای خشک نگهداری شود
فقط یک‌بار مصرف گردد
زمانی‌که بسته‌بندی باز یا مخدوش است استفاده نشود
استریل شده بوسیله اتیلن اکساید



Camera Cover (Endoscopic and Probe Cover)

Description

To cover and maintain sterility, all types of endoscopic cameras, including: laparoscopic, arthroscopic, cystoscopic, etc., which cover the camera up to the lens junction and are fixed on the lens

Its length is 250 cm and in addition it can be used for all kinds of cables, tubes and probes in surgery.

Warning

Keep dry
Use only once
Don't use when package has been opened or damaged
Sterile EO Gas

Code No.	Product	Dimension w×l	Packaging
1170	Endoscope cover	15×250cm	100 Packs/Box
1171	Clips Endoscope camera cover	15×250cm	100 Packs/Box

پوشش دوربین (دوربین آندوسکوپی و پروب‌ها)

توضیحات

جهت پوشش و حفظ استریلیته انواع دوربین‌های آندوسکوپی اعم از: لاپاراسکوپی، آرتروسکوپی، سیستوسکوپی و ... که دوربین را تا محل اتصال لنز می‌پوشاند و روی لنز ثابت می‌شود

طول آن ۲۵۰ سانتی‌متر می‌باشد و علاوه بر آن برای انواع کابل، شلنگ و پروب‌ها در جراحی قابل استفاده می‌باشد.

هشدار

در جای خشک نگهداری شود
فقط یک‌بار مصرف گردد
زمانی‌که بسته‌بندی باز یا مخدوش است استفاده نشود
استریل شده بوسیله اتیلن اکساید



HemoClips

Features

Use polymers or insulating Titanium materials

Indication

They are designed to block blood vessels (arteries and veins) during open surgery or laparoscopy, which aims at stopping the bleeding

Specification

No interference with MRI, CT, X-RAY
No accessories
use it with applier
Sterile: EO Gas

Instruction

After removing the product from the packaging, we select a suitable applier. We slowly remove the clips from the base so that the pressure is not inserted in the applier's handle to prevent any damage to the applier tab. after removal of the clips, we fixed it on the desired vessel and using the applier

Warning

Keep dry
Use only once
After using several clips, the rest of the clips are discarded
Don't use it when the package has been opened or damaged

Code No.	Size	Measurement of vessels	Color	Material	Packaging
15301	S	2mm-6mm	Blue	Titanium	50 Packs/Box
15302	ML	3mm-10mm	Green	Polymer	20 Packs/Box
15303	L	5mm-13mm	Purple	Polymer	20 Packs/Box
15304	XL	7mm-16mm	Gold (brown)	Polymer	20 Packs/Box

کلیپس عروقی

خصوصیات

تولید شده از جنس پلیمر یا تیتانیوم نارسانا

موارد استفاده

کلیپس‌های کاشتنی برای بستن بیرونی عروق خونی (وریدها و شریان‌ها) در طول جراحی باز یا لاپاراسکوپی جهت توقف خونریزی

ویژگی‌ها

- عدم تداخل با MRI ، CT ، X-RAY
- فاقد لوازم جانبی است
- برداشتن ابزار با کمک اپلایر
- استریل به وسیله اتیلن اکساید

روش استفاده

پس از خارج کردن محصول از بسته بندی، اپلایر مناسب را انتخاب نموده و توسط آن به آرامی کلیپس را از پایه برمی داریم به طوری که فشاری به دسته‌های اپلایر وارد نشده تا از آسیب به زبانه اپلایر جلوگیری شده و کلیپس نیفتد. پس از برداشتن کلیپس آن را روی رگ مورد نظر ثابت کرده و با استفاده از اپلایر آن را قفل می‌کنیم.

هشدار

- درجای خشک نگهداری شود.
- فقط یکبار مصرف گردد.
- پس از استفاده، تعداد کلیپس‌های باقی‌مانده، دور ریخته شوند.
- زمانیکه بسته‌بندی باز و یا مخدوش است استفاده نگردد.

